


Sitter Imbracatura

FISSAGGIO E COLLEGAMENTI DELL'IMBRACATURA PETTORALE DEL SITTER

Schema dell'imbracatura

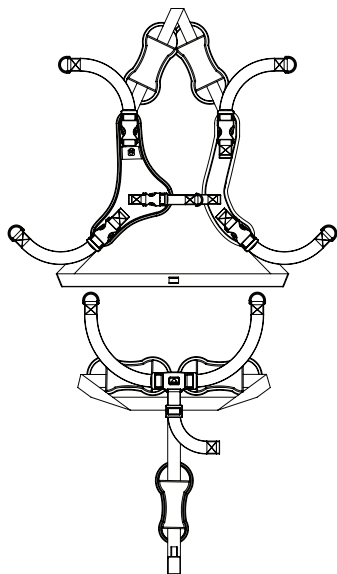

Imbracatura installata



Stabilizzatore pettorale
a 5 punti

Cinghia pelvica a 3 punti,
bacino e attacco inferiore
della cintura

Cinghia d'aggancio per
attaccarsi alla sedia, etc.



INSTALLAZIONE IMBRACATURA



Step 1
Passare la cinghia dell'at-
tacco inferiore della cintura
attraverso la fessura cen-
trale sul fondo



Step 2
Passare la cinghia destra
del bacino attraverso la
fessura destra



Step 3
Passare la cinghia sinistra
del bacino attraverso la
fessura sinistra



Step 4
Allacciare la fibbia

INSTALLAZIONE DELL'IMBRACATURA



Step 1
Slacciare la cinghia pettorale destra e spostare la cinghia dalla fessura delle spalle verso sinistra




Step 2
Passare la cinghia attorno allo schienale e fuori dalla fessura delle spalle destra



Step 3
Agganciare alla parte superiore della spalla destra l'imbracatura toracale



Step 4
Sganciare le cinghie laterali destre e far scivolare attraverso la fessura del bacino

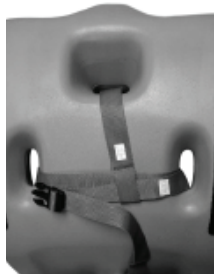

Step 5
Procedere passando la cinghia sotto l'attacco inferiore della cintura e sopra e fuori la fessura sinistra



Step 6
Riallacciare la clip sul petto con la parte finale del lato destro dell'imbracatura del petto



Step 1
Passare le cinghie sotto la fessura del bacino sinistro



Step 2
Passare le cinghie sotto il sitter fino in cima dalla fessura del bacino destro

GUIDA PER L'ALLACCIAMENTO DELLE CINGHIE



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329
PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CARE AD
ROSENVAAGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK
TEL +45 24 66 55 60
WEB www.globalcaread.com



Date: d.

**fiveyear
warranty**

© 2009 Bergeron By Design

The information contained herein is subject to change without notice.
Bergeron By Design shall not be liable for technical errors or omissions herein.