


Sitter Harness

FIXATIE VOOR DE SITTER BEVESTIGEN EN VERBINDEN

Installeren van de fixatie

Diagram van de fixatie

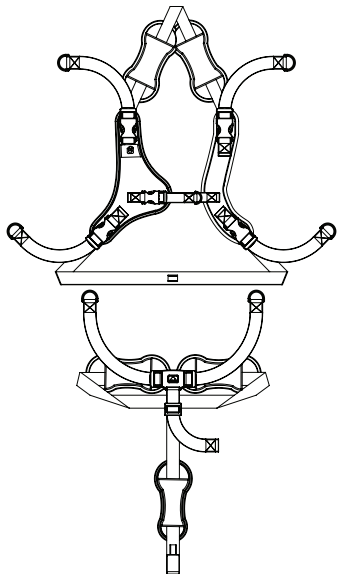


Borstriemen
5-punts tuigje

3-punts bekkenfixatie
Taille- en kruisbanden

Bevestigingsriem om
aan een stoel etc. te
bevestigen



INSTALLEREN VAN DE BEKKENFIXATIE

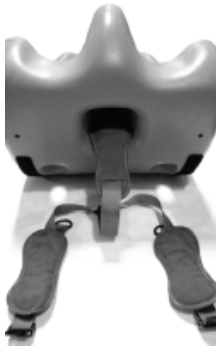

Stap 1
Kruis de riem door het
onderste centrale slot



Stap 2
Rechter taillieriem door het
rechter slot halen



Stap 3
Linker taillieriem door het
linker slot



Stap 4
Gesp vastklikken

INSTALLATIE VAN DE BORSTFIXATIE



Stap 1
Maak de rechter borstriem los en laat deze door het linker schouder slot glijden.




Stap 2
Bevestig de riem achter de rug en steek deze in het rechter schouder slot.



Stap 3
Bevestig aan de punt van het rechter schouder tuigje



Stap 4
Maak de rechter laterale riem los en schuif deze door het linker taille slot

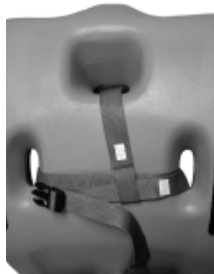

Stap 5
Bevestig de riemen onder het onderlichaam, over en door het rechtterslot.



Stap 6
Herbevestig de borstclip aan de bodem van de rechterkant van de borstfixatie.



Stap 1
Bevestig de riem onder door het linker taille slot



Stap 2
Bevestig de riem onder de Sitter op het bovenste punt en steek het in het rechter taille slot

INSTRUCTIE OM DE RIEM TE BEVESTIGEN



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329
PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**

GLOBAL CARE AD
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK
TEL +45 24 66 55 60
WEB www.globalcaread.com



Date: d.



© 2009 Bergeron By Design

Bovenstaande informatie kan zonder waarschuwing vooraf veranderen.
Bergeron By Design is niet verantwoordelijk voor technische fouten of veranderingen.